

Checklist per il corretto utilizzo dell'elettrodo neutro




Prima dell'intervento chirurgico



1 | Aprire la confezione

Aprire la confezione immediatamente prima dell'uso. Dopo l'apertura della confezione, gli elettrodi neutri sono stabili e funzionali per un massimo di 7 giorni.

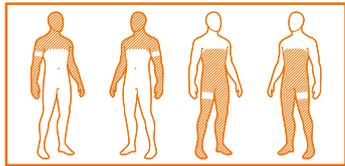

2 | Determinare il sito di applicazione adatto

A seconda del campo operatorio, applicare preferibilmente l'elettrodo neutro al braccio o alla coscia più vicini, mantenendo tuttavia una distanza di almeno 20 cm dal sito chirurgico. Il percorso della corrente non deve mai passare sul cuore.

- Regione operatoria al di sopra del cuore (ad es. testa, collo):
applicare l'elettrodo neutro al braccio destro o sinistro
- Regione operatoria al di sotto del cuore (ad es. addome):
applicare l'elettrodo neutro alla gamba destra o sinistra



3 | Prestare attenzione a eventuali ferite o danni cutanei

Collocare l'elettrodo neutro preferibilmente su una zona di tessuto sano e su strati muscolari ben irrorati. Evitare zone del corpo sensibili.

Non applicarlo mai su cicatrici, ossa o impianti.




4 | Rasare la cute

Per garantire un contatto adeguato, la cute del punto di applicazione deve essere asciutta e priva di creme o disinfettanti. È inoltre necessario eliminare un'eventuale peluria fitta.



5 | Staccare l'elettrodo neutro dalla pellicola

Staccare l'elettrodo neutro dalla pellicola protettiva: Afferrarlo dall'angolo (non dalla linguetta) e tirare con cautela. È preferibile staccare l'elettrodo neutro iniziando dal lato opposto alla connessione. Non riapplicare mai l'elettrodo neutro alla pellicola.

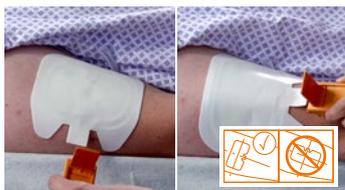

6 | Posizionare l'elettrodo neutro

Il bordo lungo dell'elettrodo neutro a orientamento fisso deve essere rivolto verso il campo operatorio.



7 | Garantire il contatto dell'intera superficie

Per garantire un contatto sufficiente, è necessario che l'intera superficie dell'elettrodo neutro sia applicata uniformemente e saldamente sulla cute. A tale scopo farla aderire lisciandola con la mano.

Checklist per il corretto utilizzo dell'elettrodo neutro

Dopo l'intervento chirurgico



8 | Staccare l'elettrodo neutro dalla cute

Staccare l'elettrodo neutro dalla cute. Se l'elettrodo neutro aderisce saldamente alla cute, staccare il bordo con cautela aiutandosi con la seconda mano durante l'operazione.



9 | Avvertenza! Prodotto monouso

Gli elettrodi neutri sono prodotti monouso. Questo simbolo indica che l'elettrodo neutro non può essere utilizzato più volte. Un elettrodo neutro applicato in modo errato non può essere riutilizzato.



10 | Smaltire l'elettrodo neutro

Dopo l'utilizzo smaltire l'elettrodo neutro. Lo smaltimento dei dispositivi medici, dei materiali di imballaggio e degli accessori deve avvenire in conformità con le normative e le leggi nazionali vigenti.

Attenzione: la presente checklist non sostituisce le istruzioni per l'uso. Le informazioni e i dati in essa contenuti non potranno essere utilizzati per avanzare pretese nei confronti di BOWA-electronic GmbH & Co. KG. In casi o circostanze particolari potrebbe essere necessario discostarsi da quanto indicato nel presente documento. Per indicazioni in merito ai dispositivi, rivolgersi al rappresentante BOWA MEDICAL di riferimento.

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Heinrich-Hertz-Strasse 4-10 | 72810 Gomaringen | Germany | Telefono +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com