



Checkliste zur Patient:innen-Vorbereitung bei der Anwendung von Elektrochirurgie



- ✓ Die Patient:innen sind trocken und auf einer elektrisch isolierten OP-Tischauflage gelagert.

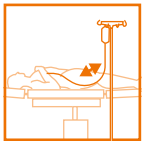

- ✓ Die Patient:innen haben keinen Kontakt mit elektrisch leitfähigen Gegenständen (Infusionsständer, Schläuche, Kabel, etc.).

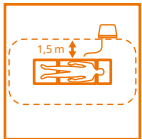


- ✓ Die Patient:innen haben zum elektrochirurgischen Gerät einen Abstand größer als 1,5 m.



- ✓ An Bereichen von potenzieller Schweißbildung liegen trockene Tücher; Haut-zu-Haut-Kontakt bei Hautfalten oder Brustfalten werden vermieden.



- ✓ Bei langer Operationsdauer wird der Urin der Patient:innen durch einen Katheter abgeleitet.

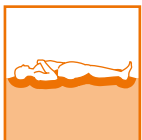

- ✓ Eine geeignete Auflagefläche der Patient:innen ist sichergestellt, um Drucknekrosen zu verhindern.



- ✓ Die Patient:innen haben alle elektrisch leitfähigen Teile entfernt (Uhren, Ketten, Ringe, Piercings, Armbänder, entfernbare Zahnprothesen etc.).



- ✓ Die Neutralelektroden sind richtig an den Patient:innen platziert.



- ✓ Bei Patient:innen mit Herzschrittmacher wurde vor der Anwendung ein Kardiologe konsultiert.



- ✓ Das OP-Feld ist frei von explosiven Gasen oder entzündlichen Flüssigkeiten und Materialien.

Achtung: Diese Checkliste ersetzt nicht den Verwendungshinweis. Aus den darin enthaltenen Informationen und Angaben lassen sich keine Ansprüche gegen BOWA-electronic GmbH ableiten. In Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, von den in diesem Dokument gemachten Angaben abzuweichen. Wenden Sie sich für die Geräteeinweisungen an den für Sie zuständigen BOWA MEDICAL-Vertreter.