BOWA ACADEMY




Lista kontrolna prawidłowego zastosowania elektrody neutralnej

Przed operacją



1 | Otworzyć opakowanie

Opakowanie należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed użyciem. Elektrody neutralne zachowują trwałość w otwartym opakowaniu przez maksymalnie 7 dni.

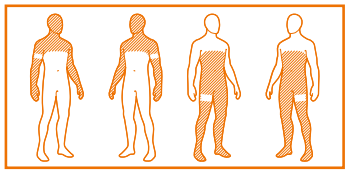

2 | Ustalić odpowiednie miejsce zastosowania

W zależności od lokalizacji pola operacyjnego elektrodę neutralną należy umieszczać w miarę możliwości na najbliższym ramieniu lub udzie, jednak nie bliżej niż 20 cm od miejsca operacji. Droga przepływu prądu nie może przechodzić przez serce.

- Rejon operacji powyżej serca (tarczyca, obszar szyjny, głowa itd.):
  Umieścić elektrodę na prawym lub lewym ramieniu
- Rejon operacji poniżej serca (jama brzuszna, obszary ginekologiczne itd.):
  Umieścić elektrodę na prawej lub lewej nodze



3 | Zwrócić uwagę na uszkodzoną lub zranioną skórę

Elektrodę neutralną w miarę możliwości umieszczać na zdrowej tkance. Unikać tkanki bliznowatej, krwawień, tatuaży lub kościstych obszarów ciała.




4 | Ogolić skórę

Aby zagwarantowane było odpowiednie przyleganie, wybrany obszar skóry musi być suchy i pozbawiony kremów lub środków dezynfekujących. Należy także usunąć silne owłosienie ciała.



5 | Odkleić elektrodę neutralną od folii

Odkleić elektrodę neutralną od folii ochronnej: Chwycić za narożnik (nie za wypustkę) i ostrożnie odkleić. Elektrodę neutralną najlepiej jest odklejać od strony przeciwnej do przyłącza. Elektrody neutralnej nie należy przyklejać z powrotem do folii.

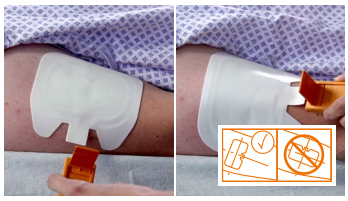

6 | Wypozycjonować elektrodę neutralną

W przypadku kierunkowych elektrod neutralnych długa krawędź musi być skierowana do pola operacyjnego.



7 | Skontrolować przyleganie na całej powierzchni

W celu zagwarantowania właściwego przylegania, elektroda neutralna musi być przyklejona do skóry równomiernie i na całej powierzchni. W tym celu należy wyrównać elektrodę neutralną dłonią.

BOWA-electronic GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4–10 | 72810 Gomaringen | Niemcy | Telefon +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com



Lista kontrolna prawidłowego zastosowania elektrody neutralnej

Po operacji



8 | Zdjąć elektrodę neutralną ze skóry

Zdjąć elektrodę neutralną ze skóry. Jeśli elektroda przylega bardzo mocno, podczas ściągania należy pomagać sobie drugą dłonią; elektrodę można ostrożnie odkleić od narożnika.



9 | Wskazówka! Produkt jednorazowy

Elektrody neutralne są produktami jednorazowymi. Ten symbol sygnalizuje, że elektrody neutralnej nie można użyć ponownie. Nie wolno ponownie używać nieprawidłowo zaaplikowanej elektrody neutralnej.



10 | Zutylizować elektrodę neutralną

Po użyciu zutylizować elektrodę neutralną. Utylizację wyrobów medycznych, materiału opakowaniowego i akcesoriów należy wykonywać zgodnie z przepisami i ustawami obowiązującymi w danym kraju.

© BOWA-electronic GmbH 2026

Uwaga: Niniejsza lista kontrolna nie zastępuje instrukcji użytkowania. Zawarte w niej informacje i dane nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń względem firmy BOWA-electronic GmbH. W zależności od indywidualnych okoliczności może być konieczne odejście od informacji podanych w niniejszym dokumencie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące urządzeń, należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela BOWA MEDICAL.

BOWA-electronic GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4–10 | 72810 Gomaringen | Niemcy | Telefon +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com