BOWA
ACADEMY




Checklist per la preparazione del paziente in caso di utilizzo dell'elettrochirurgia



☑ | Il paziente ha la cute asciutta ed è posizionato su un tavolo operatorio con materassino elettricamente isolato.




☑ | Il paziente non è in contatto con oggetti elettricamente conduttivi (aste portaflebo, tubi, cavi ecc.).

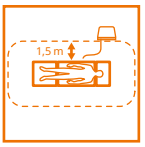

☑ | Il paziente si trova a una distanza di oltre 1,5 m dal dispositivo elettrochirurgico.



☑ | Nelle aree soggette a traspirazione potenzialmente intensa sono allocate teli asciutti; evitare il contatto cute-cute in corrispondenza di pieghe cutanee o mammarie.

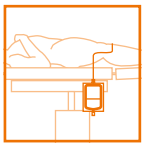

☑ | In caso di interventi di lunga durata, l'urina del paziente deve essere fatta defluire tramite un catetere.



☑ | Per evitare l'insorgenza di necrosi da pressione, viene garantita un'adeguata superficie di contatto del paziente.



☑ | Tutti gli oggetti del paziente elettricamente conduttivi sono stati rimossi (orologi, collane, anelli, orecchini e piercing, bracciali, protesi dentarie amovibili ecc.).



☑ | L'elettrodo neutro è applicato correttamente al paziente.



☑ | Per i pazienti con pacemaker, prima dell'uso è stato consultato un cardiologo.



☑ | Il campo operatorio è privo di gas esplosivi o liquidi e materiali infiammabili.

© BOWA-electronic GmbH 2026

Attenzione: la presente checklist non sostituisce le istruzioni per l'uso. Le informazioni e i dati in essa contenuti non potranno essere utilizzati per avanzare pretese nei confronti di BOWA-electronic GmbH. In casi o circostanze particolari potrebbe essere necessario discostarsi da quanto indicato nel presente documento.
Per indicazioni in merito ai dispositivi, rivolgersi al rappresentante BOWA MEDICAL di riferimento.

BOWA-electronic GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4–10 | 72810 Gomaringen | Germany | Telefono +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com