BOWA
ACADEMY




Lista kontrolna przygotowania pacjenta podczas zastosowania urządzeń elektrochirurgicznych



☑ | Skóra pacjenta jest sucha, a pacjent ułożony jest na elektrycznie zaizolowanym stole operacyjnym.




☑ | Pacjent nie ma kontaktu z przedmiotami przewodzącymi prąd elektryczny (stojakiem kroplówki, wężami, kablami itd.).

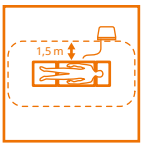

☑ | Odstęp pomiędzy pacjentem a urządzeniem elektrochirurgicznym powinien wynosić powyżej 1,5 m.



☑ | W obszarach, w których potencjalnie może dochodzić do powstawania potu, umieszczona jest sucha tkanina; zapobiegnięto kontaktowi „skóra do skóry” w miejscu fałd skórnych lub w okolicach piersi.

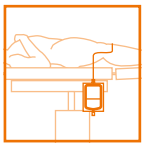

☑ | W przypadku dłuższego czasu trwania zabiegu mocz pacjenta należy odprowadzać poprzez cewnik.



☑ | Zapewniono odpowiednią powierzchnię do ułożenia pacjenta w celu zapobiegnięcia odleżynom.



☑ | Z ciała pacjenta usunięto wszelkie elementy przewodzące prąd elektryczny (zegarki, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, piercing, wyjmowane protezy zębowe itd.).



☑ | We właściwy sposób umieszczono elektrodę neutralną na pacjencie.



☑ | W przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca przed zabiegiem przeprowadzono konsultację z kardiologiem.



☑ | Pole operacyjne jest wolne od gazów wybuchowych oraz łatwopalnych cieczy i materiałów.

© BOWA-electronic GmbH 2026

Uwaga: Niniejsza lista kontrolna nie zastępuje instrukcji użytkowania. Zawarte w niej informacje i dane nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń względem firmy BOWA-electronic GmbH. W zależności od indywidualnych okoliczności może być konieczne odejście od informacji podanych w niniejszym dokumencie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące urządzeń, należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela BOWA MEDICAL.

BOWA-electronic GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4–10 | 72810 Gomaringen | Niemcy | Telefon +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com